
CE

⚠WARNING: Please mind potential fire risk and strictly follow the instruction manual for charging and storage. For disposal, please check your local authority's website for more information and dispose of the lithium-ion battery safely in accordance with the applicable legal requirements.

POWERED
EAR WAX REMOVER

USER MANUAL

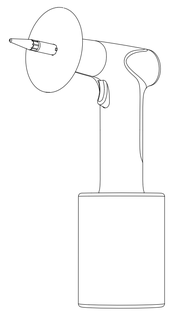

Thank you for purchasing our product. In order to ensure safety and better perfmance,please carefully read this manual before use

Catalog

English 01-05
Deutsch 06-10
Français 11-15
Español 16-20
Italiano 21-25
日本語 26-30

CE FC UK CA RoHS Made in China

尺寸：130*160mm

英文

Before use, please read this instruction manual carefully and completely, and keep it for future reference!

Precautions

Please read all instructions, warnings and tips carefully before use. Improper use may cause serious personal injury and property damage.


1.Do not put corrosive liquids into the product to avoid damage to the human body and the product.
2. It is normal to feel pressure but no pain. If you feel pain, please stop using this product immediately and consult your doctor for professional help.
3. Children or people with disabilities should use this product under the supervision of an adult or guardian.
4. This product is not a toy. Please keep it out of reach of children.
5. This product is equipped with a battery. Please keep it away from fire, moisture and high temperature. It may explode due to overheating.
6. If you do not use this product, please store it in a dry place.
7. Make sure to connect a suitable power supply DC5V to charge the product.
8. Do not use solutions below body temperature to avoid discomfort. It is recommended to use warm water (not too hot to avoid burns)
9. Do not change or modify the product, or disassemble the internal equipment, otherwise it may damage the product or cause personal injury.
10. Do not classify it as household waste. When you no longer need this product, please use your local government's recycling process and take it to a local electrical equipment recycling station.

Warm Tips: All pictures in the manual are for reference only. Due to product updates or upgrades, there may be differences between the actual product and the picture, please refer to the actual product.

Troubleshooting

1. If the product cannot be turned on, please charge it to prevent low battery.
2. If the product has a short working time after being fully charged, please charge and use it in an ambient temperature between 15~35℃, or if the charging time is insufficient, please charge it.
3. If the LED light does not light up when charging, please check whether the power supply is connected correctly.
4. If the water pressure is too low, please replace the earplugs with new ones to prevent blockage or damage, or select a stronger mode as needed.

Product Introduction

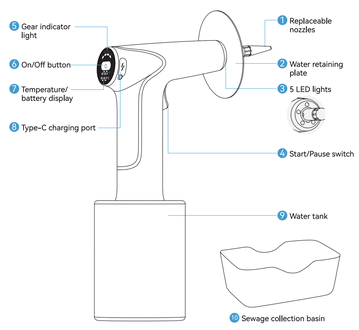

Function Introduction

① Replaceable nozzle

The product is equipped with 1, 3, and 5-hole nozzles. You can choose to replace different nozzles according to actual conditions when using it. The more nozzle holes, the smaller the spray force



② Water baffle

When in use, you can install a water baffle to prevent water from spraying onto your body during use



③ 5 LED lights

When the product is working, the LED lights will automatically light up to illuminate the areas where work is needed



④ Start/pause switch

Press once to start, press again to pause, and use it in a cycle



⑤ Gear indicator light

The gears are divided into L, soft impact, M gear, medium impact, P gear, pulse mode, and H gear, strong impact. The corresponding gear light flashes when the work is suspended, and it is always on when working



⑥ On/off button

Press long to turn on/off, short press to switch the impulse gear, double-click to switch the power display



Switch between temperature units "°F and °C"

Long press the water switch (Figure 1), then short press the power switch (Figure 2) to switch the temperature unit.



⑦ Temperature and power display screen

The water temperature display corresponds to the "**°F °C**" icon on the side, and the power display corresponds to the "100" icon on the side. The "100" icon flashes when charging. The fully charged icon stops flashing and the battery level is displayed as "100".



⑧ Type-C charging port

Use a 5V-1A charger to charge the product, and use the Type-C interface for the charging cable



⑨ Clean water tank

Please fill it with warm water that adapts to body temperature when using it, and avoid using water that is too low or too clear, which may cause harm to the human body. The water tank capacity is 500 ml



⑩ Sewage collection tank

When using it, you can put the sewage collection tank next to your ear to collect sewage



Before use

1.It is normal when the product(water bottle, water tube, etc.)has some residual distilled water that used for testing performance.
2.It is recommended to use 1st gear mode for first time use,choose the other modes based on your needs.
3.It is recommended to soften heavy or hard earwax before irrigation.

Cleaning and maintenance

1.Take out the water tank, rinse the inside and outside of the water tank with water, and then let it air dry.



2. Replacement: After the nozzle has been used for 90 days, it needs to be replaced with a new one.
3. Storage: Wipe the device with a clean damp cloth. Make sure the device is dry before storing in a cool and dry place.

Notice:

(1) Avoid submerging the device in water to prevent damage.
(2) Avoid using harsh chemicals: Use dishwashing liquid or warm water for cleaning rather than harsh chemicals or solvents.

Environmental Protection

1. Proper disposal: When disposing of the flusher or its components, follow local e-waste regulations and guidelines and avoid disposing of it with normal household waste.
2. Battery recycling: Recycle rechargeable batteries properly. Check local facilities or collection points for battery recycling.
3. Energy efficiency: Save energy by turning off the flusher when not in use and unplugging the charger when the battery is fully charged.

Charging Instructions

*** Please use the Type-c charging cable that comes with the product to charge your device.**

1. Turn off the device before charging and make sure it is not in use.
2. Keep the device and charger away from water to prevent any electrical hazards.
3. The LCD display has a built-in power display for easy viewing of the power level.
4. After fully charged, disconnect the device from the charger.

Customer Support

If you have any questions about the performance of your product, or if you encounter a situation where accessories are missing or damaged, please contact our Customer Support.

Product Parameters

Product name: Powered Ear Wax Remover	Input: Type-C DC 5V/1A
Charging time: 3 hours	Water tank capacity: 500ml

德语

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig und vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf!

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen, Warnungen und Tipps sorgfältig durch. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.


1. Geben Sie keine ätzenden Flüssigkeiten in das Produkt, um Schäden am menschlichen Körper und am Produkt zu vermeiden.
2. Es ist normal, Druck zu spüren, aber keine Schmerzen. Wenn Sie Schmerzen verspüren, beenden Sie die Verwendung dieses Produkts sofort und wenden Sie sich für professionelle Hilfe an Ihren Arzt.
3. Kinder oder Menschen mit Behinderungen sollten dieses Produkt unter Aufsicht eines Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten verwenden.
4. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Dieses Produkt ist mit einer Batterie ausgestattet. Bitte halten Sie es von Feuer, Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern. Es kann aufgrund von Überhitzung explodieren.
6. Wenn Sie dieses Produkt nicht verwenden, lagern Sie es bitte an einem trockenen Ort.
7. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Laden des Produkts eine geeignete DC5V-Stromversorgung anschließen.
8. Verwenden Sie keine Lösungen unter Körpertemperatur, um Beschwerden zu vermeiden. Es wird empfohlen, warmes Wasser zu verwenden (nicht zu heiß, um Verbrennungen zu vermeiden).
9. Ändern oder modifizieren Sie das Produkt nicht und zerlegen Sie die interne Ausrüstung nicht, da dies sonst das Produkt beschädigen oder zu Verletzungen führen kann.
10. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. Wenn Sie das Produkt nicht mehr benötigen, nutzen Sie bitte das Recyclingverfahren Ihrer Gemeinde und bringen Sie es zu einer örtlichen Recyclingstation für Elektrogeräte.

Warme Tipps: Alle Bilder im Handbuch dienen nur als Referenz. Aufgrund von Produktaktualisierungen oder -upgrades kann es zu Abweichungen zwischen dem tatsächlichen Produkt und dem Bild kommen. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Fehlerbehebung

1. Wenn sich das Produkt nicht einschalten lässt, laden Sie es bitte auf, um einen niedrigen Batteriestand zu vermeiden.
2. Wenn das Produkt nach vollständigem Laden nur eine kurze Betriebszeit hat, laden Sie es bitte auf und verwenden Sie es bei einer Umgebungstemperatur zwischen 15 und 35 °C. Wenn die Ladezeit nicht ausreicht, laden Sie es bitte auf.
3. Wenn die LED-Leuchte beim Laden nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist.
4. Wenn der Wasserdruck zu niedrig ist, ersetzen Sie die Ohrstöpsel durch neue, um Verstopfungen oder Schäden zu vermeiden, oder wählen Sie bei Bedarf einen stärkeren Modus.

Produkteinführung

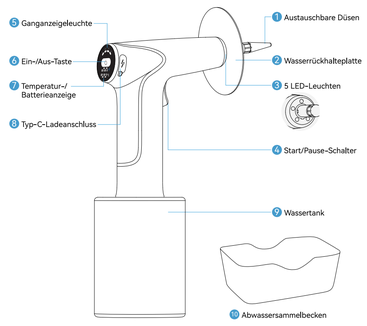

Funktionseinführung

① Austauschbare Düse

Das Produkt ist mit 1-, 3- und 5-Loch-Düsen ausgestattet. Sie können je nach Einsatzbedingungen verschiedene Düsen austauschen. Je mehr Düsenlöcher, desto geringer die Sprühkraft.



② Wasserabweiser

Sie können während des Gebrauchs einen Wasserabweiser installieren, um zu verhindern, dass Wasser auf Ihren Körper spritzt.

③ 5 LED-Leuchten

Wenn das Produkt in Betrieb ist, leuchten die LED-Leuchten automatisch auf, um die Bereiche zu beleuchten, in denen gearbeitet werden muss.



④ Start-/Pause-Schalter

Einmal drücken zum Starten, erneut drücken zum Pausieren und für einen Zyklus verwenden.




⑤ Ganganzeige

Die Gänge sind in L (weicher Schlag), M (mittlerer Schlag), P (Pulsmodus) und H (starker Schlag) unterteilt. Die entsprechende Ganganzeige blinkt, wenn die Arbeit unterbrochen wird, und leuchtet während der Arbeit dauerhaft.



⑥ Ein-/Aus-Taste

Lang drücken zum Ein-/Ausschalten, kurz drücken zum Umschalten des Impulsgetriebes, zweimal drücken zum Umschalten der Leistungsanzeige

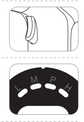

Umschalten zwischen den Temperatureinheiten, °Fund °C"

Drücken Sie lange auf den Wasserschalter (Abbildung 1) und dann kurz auf den Netzschalter (Abbildung 2), um die Temperatureinheit umzuschalten.



⑦ Temperatur- und Ladezustandsanzeige

Die Wassertemperaturanzeige entspricht dem Symbol „**°F °C**" an der Seite und die Leistungsanzeige entspricht dem Symbol „100" an der Seite. Das Symbol „100" blinkt während des Ladevorgangs. Das Symbol für vollständig geladen hört auf zu blinken und der Akkustand wird als „100" angezeigt.



⑧ Typ-C-Ladeanschluss

Verwenden Sie zum Laden des Produkts ein 5-V-1-A-Ladegerät und verwenden Sie die Typ-C-Schnittstelle für das Ladekabel.



⑨ Sauberer Wassertank

Bitte füllen Sie den Tank mit warmem, körpertemperaturangepasstem Wasser. Vermeiden Sie zu niedriges oder zu klares Wasser, da dies schädlich sein kann. Der Tank fasst 500 ml.

⑩ Abwassersammelbehälter

Stellen Sie den Abwassersammelbehälter neben Ihr Ohr, um das Abwasser aufzufangen.



Vor der Verwendung

1. Es ist normal, dass das Produkt (Wasserflasche, Wasserschlauch usw.) Reste destillierten Wassers enthält, die zum Testen der Leistung verwendet wurden.
2. Es wird empfohlen, bei der ersten Verwendung den 1. Gang-Modus zu verwenden. Wählen Sie die weiteren Modi je nach Bedarf.
3. Es wird empfohlen, hartnäckiges oder hartes Ohrenschmalz vor der Spülung aufzuweichen.

Reinigung und Wartung

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus, spülen Sie ihn innen und außen mit Wasser ab und lassen Sie ihn anschließend an der Luft trocknen.



2. Austausch: Nach 90 Tagen Gebrauch muss die Düse durch eine neue ersetzt werden.
3. Lagerung: Wischen Sie das Gerät mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Stellen Sie sicher, dass das Gerät trocken ist, bevor Sie es an einem kühlen und trockenen Ort lagern.

Beachten:

(1) Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser, um Schäden zu vermeiden.
(2) Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Chemikalien: Verwenden Sie zum Reinigen Spülmittel oder warmes Wasser anstelle aggressiver Chemikalien oder Lösungsmittel.

Umweltschutz

1. Ordnungsgemäße Entsorgung: Beachten Sie bei der Entsorgung der Spülung oder ihrer Komponenten die örtlichen Vorschriften und Richtlinien für Elektroschrott und vermeiden Sie die Entsorgung im normalen Hausmüll.
2. Batterierecycling: Recyceln Sie wiederaufladbare Batterien ordnungsgemäß. Informieren Sie sich bei örtlichen Einrichtungen oder Sammelstellen zum Batterierecycling.
3. Energieeffizienz: Sparen Sie Energie, indem Sie die Spülung ausschalten, wenn sie nicht verwendet wird, und das Ladegerät ausstecken, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Ladeanleitung

*** Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts das mit dem Produkt mitgelieferte Ladekabel Typ C.**

1. Schalten Sie das Gerät vor dem Laden aus und stellen Sie sicher, dass es nicht verwendet wird.
2. Halten Sie das Gerät und das Ladegerät von Wasser fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
3. Das LCD-Display verfügt über eine integrierte Ladestandsanzeige, damit Sie den Ladestand leicht ablesen können.
4. Trennen Sie das Gerät nach dem vollständigen Laden vom Ladegerät.

Kundenservice

Wenn Sie Fragen zur Leistung Ihres Produkts haben oder Zubehör fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Product Parameters

Produktname: Elektrischer Ohrenschmalzentferner	Eingang: Typ C DC 5 V/1 A
Ladezeit: 3 Stunden	Wassertankkapazität: 500 ml

法语

Avant utilisation, veuillez lire attentivement et complètement ce manuel d'instructions et le conserver pour référence ultérieure !

Précautions

Veuillez lire attentivement toutes les instructions, avertissements et conseils avant utilisation. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles graves et des dommages matériels.


1. Ne pas mettre de liquides corrosifs dans le produit pour éviter d'endommager le corps humain et le produit.
2. Il est normal de ressentir une pression mais pas de douleur. Si vous ressentez de la douleur, arrêtez immédiatement d'utiliser ce produit et consultez votre médecin pour obtenir une aide professionnelle.
3. Les enfants ou les personnes handicapées doivent utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte ou d'un tuteur.
4. Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le garder hors de portée des enfants.
5. Ce produit est équipé d'une batterie. Veuillez le tenir à l'écart du feu, de l'humidité et des températures élevées. Il peut exploser en raison d'une surchauffe.
6. Si vous n'utilisez pas ce produit, veuillez le stocker dans un endroit sec.
7. Assurez-vous de connecter une alimentation DC5V appropriée pour charger le produit.
8. N'utilisez pas de solutions inférieures à la température du corps pour éviter tout inconfort. Il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède (pas trop chaude pour éviter les brûlures)
9. Ne changez pas ou ne modifiez pas le produit, ni ne démontez l'équipement interne, sinon cela pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures corporelles.
10. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Lorsque vous n'avez plus besoin de ce produit, utilisez le processus de recyclage de votre municipalité et apportez-le à une station de recyclage locale pour équipements électriques.

Conseils : toutes les images du manuel sont fournies à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour ou des mises à niveau du produit, il peut y avoir des différences entre le produit réel et l'image, veuillez vous référer au produit réel.

Dépannage

1. Si le produit ne peut pas être allumé, veuillez le charger pour éviter une batterie faible.
2. Si le produit a une courte durée de fonctionnement après avoir été complètement chargé, veuillez le charger et l'utiliser à une température ambiante comprise entre 15 et 35 °C ; ou si le temps de charge est insuffisant, veuillez le charger.
3. Si le voyant LED ne s'allume pas pendant la charge, veuillez vérifier si l'alimentation est correctement connectée.
4. Si la pression de l'eau est trop faible, veuillez remplacer les bouchons d'oreille par des neufs pour éviter tout blocage ou tout dommage, ou sélectionnez un mode plus fort si nécessaire.

Présentation du produit

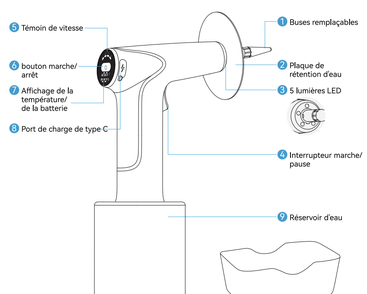

Introduction à la fonction

① Buse remplaçable

Le produit est équipé de buses à 1, 3 et 5 trous. Vous pouvez choisir de remplacer les buses selon les conditions d'utilisation. Plus le nombre de trous est élevé, plus la puissance de pulvérisation est faible.



② Déflecteur d'eau

Lors de l'utilisation, vous pouvez installer un déflecteur d'eau pour éviter les projections d'eau sur votre corps.



③ 5 LED

Lorsque le produit est en marche, les LED s'allument automatiquement pour éclairer les zones à traiter.



④ Interrupteur marche/pause

Appuyez une fois pour démarrer, appuyez à nouveau pour mettre en pause et utilisez-le en cycle.




⑤ Témoin lumineux de vitesse

Les vitesses sont divisées en L (impact doux), M (impact moyen), P (impulsion) et H (impact fort). Le voyant correspondant clignote lorsque le travail est interrompu et reste allumé en permanence.



⑥ Bouton marche/arrêt

Appuyez longuement pour allumer/éteindre, appuyez brièvement pour changer de vitesse, double-cliquez pour changer l'affichage de la puissance.

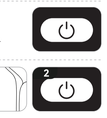

Basculer entre les unités de température « °F» et « °C» »

Appuyez longuement sur l'interrupteur d'eau (Figure 1), puis appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation (Figure 2) pour changer l'unité de température.



⑦ Écran d'affichage de la température et de la puissance

L'affichage de la température de l'eau correspond à l'icône « **°F °C** » sur le côté, et l'affichage de la puissance correspond à l'icône « 100 » sur le côté. L'icône « 100 » clignote pendant la charge. L'icône de charge complète cesse de clignoter et le niveau de batterie s'affiche comme suit : « 100 ».



⑧ Port de charge Type-C

Utilisez un chargeur 5 V-1 A pour charger le produit et utilisez l'interface Type-C pour le câble de charge.



⑨ Réservoir d'eau propre

Veuillez remplir le réservoir d'eau tiède à température corporelle lors de son utilisation. Évitez d'utiliser une eau trop claire ou trop froide, car elle pourrait être nocive pour le corps. La capacité du réservoir est de 500 ml.

⑩ Réservoir de collecte des eaux usées

Lors de son utilisation, vous pouvez placer le réservoir de collecte des eaux usées près de votre oreille pour recueillir les eaux usées.



Avant utilisation

1. Il est normal que le produit (bouteille d'eau, tube d'eau, etc.) contienne de l'eau distillée résiduelle utilisée pour tester les performances.
2. Il est recommandé d'utiliser le mode 1er rapport lors de la première utilisation. Choisissez les autres modes en fonction de vos besoins.
3. Il est recommandé de ramollir le cérumen épais ou dur avant l'irrigation.

Nettoyage et entretien

1. Retirez le réservoir d'eau, rincez l'intérieur et l'extérieur du réservoir d'eau avec de l'eau, puis laissez-le sécher à l'air libre.



2. Remplacement : après 90 jours d'utilisation, remplacez la buse par une nouvelle.
3. Stockage : essuyez l'appareil avec un chiffon propre et humide. Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

Avis:

(1) Évitez d'immerger l'appareil dans l'eau pour éviter tout dommage.
(2) Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs : utilisez du liquide vaisselle ou de l'eau chaude pour le nettoyage plutôt que des produits chimiques ou des solvants agressifs.

Protection de l'environnement

1. Élimination appropriée : lors de l'élimination du chasse d'eau ou de ses composants, respectez les réglementations et directives locales en matière de déchets électroniques et évitez de les jeter avec les ordures ménagères normales.
2. Recyclage des piles : recyclez correctement les piles rechargeables. Vérifiez les installations locales ou les points de collecte pour le recyclage des piles.
3. Efficacité énergétique : économisez de l'énergie en éteignant le chasse d'eau lorsqu'il n'est pas utilisé et en débranchant le chargeur lorsque la batterie est complètement chargée.

Instructions de charge

*** Veuillez utiliser le câble de chargement Type-C fourni avec le produit pour charger votre appareil.**

1. Éteignez l'appareil avant de le charger et assurez-vous qu'il n'est pas utilisé.
2. Gardez l'appareil et le chargeur à l'écart de l'eau pour éviter tout risque électrique.
3. L'écran LCD dispose d'un affichage de puissance intégré pour une visualisation facile du niveau de puissance.
4. Une fois complètement chargé, débranchez l'appareil du chargeur.

Assistance à la clientèle

Si vous avez des questions sur les performances de votre produit ou si vous rencontrez une situation où des accessoires sont manquants ou endommagés, veuillez contacter notre service client.

Paramètres du produit

Nom du produit : Appareil électrique pour retirer le cérumen	Entrée : Type-C DC 5V/1A
Temps de charge : 3 heures	Capacité du réservoir d'eau : 500 ml

西班牙

Antes de usar, lea atentamente y en su totalidad este manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.

Precauciones

Lea atentamente todas las instrucciones, advertencias y consejos antes de utilizar el producto. El uso inadecuado puede provocar lesiones personales graves y daños materiales.

1. No introduzca líquidos corrosivos en el producto para evitar daños al cuerpo humano y al producto.
2. Es normal sentir presión, pero no dolor. Si siente dolor, deje de usar este producto inmediatamente y consulte a su médico para obtener ayuda profesional.
3. Los niños o las personas con discapacidades deben utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto o tutor.
4. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
5. Este producto está equipado con una batería. Manténgala alejada del fuego, la humedad y las altas temperaturas. Puede explotar debido al sobrecalentamiento.
6. Si no utiliza este producto, guárdelo en un lugar seco.
7. Asegúrese de conectar una fuente de alimentación adecuada de 5 V CC para cargar el producto.
8. No utilice soluciones por debajo de la temperatura corporal para evitar molestias. Se recomienda utilizar agua tibia (no demasiado caliente para evitar quemaduras).
9. No cambie ni modifique el producto, ni desmonte el equipo interno, de lo contrario, podría dañar el producto o causar lesiones personales.
10. No lo clasifique como residuo doméstico. Cuando ya no necesite este producto, utilice el proceso de reciclaje de su gobierno local y llévelo a una estación de reciclaje de equipos eléctricos local.

Consejos útiles: todas las imágenes del manual son solo de referencia. Debido a las actualizaciones o mejoras del producto, puede haber diferencias entre el producto real y la imagen; consulte el producto real.

Solución de problemas

1. Si no se puede encender el producto, cárguelo para evitar que se agote la batería.
2. Si el tiempo de funcionamiento del producto es breve después de cargarse por completo, cárguelo y utilícelo a una temperatura ambiente de entre 15 y 35 °C, o si el tiempo de carga es insuficiente, cárguelo.
3. Si la luz LED no se enciende durante la carga, compruebe si la fuente de alimentación está conectada correctamente.
4. Si la presión del agua es demasiado baja, sustituya los tapones para los oídos por unos nuevos para evitar que se bloqueen o se dañen, o seleccione un modo más potente según sea necesario.

Introducción del producto

Introducción a la función

① Boquilla reemplazable

El producto está equipado con boquillas de 1, 3 y 5 orificios. Puede reemplazar diferentes boquillas según las condiciones de uso. Cuantos más orificios tenga la boquilla, menor será la potencia de pulverización.

② Deflector de agua

Durante su uso, puede instalar un deflector de agua para evitar que el agua le salpique el cuerpo.

③ 5 luces LED

Cuando el producto está en funcionamiento, las luces LED se encienden automáticamente para iluminar las áreas donde se necesita trabajar.

④ Interruptor de inicio/pausa

Pulse una vez para iniciar, vuelva a pulsar para pausar y úselo en un ciclo.

⑤ Luz indicadora de marcha

Las marchas se dividen en L (impacto suave), M (impacto medio), P (modo de pulso) y H (impacto fuerte). La luz de la marcha correspondiente parpadea cuando se suspende el trabajo y permanece encendida durante el trabajo.

⑥ Botón de encendido/apagado

Mantenga pulsado para encender/apagar, pulse brevemente para cambiar el modo de impulso y haga doble clic para cambiar la pantalla de potencia.

Cambiar entre las unidades de temperatura "°F y °C"

Mantenga presionado el interruptor de agua (Figura 1), luego presione brevemente el interruptor de encendido (Figura 2) para cambiar la unidad de temperatura.

⑦ Pantalla de visualización de temperatura y potencia

La temperatura del agua se muestra con el icono "**°F °C**" en el lateral, y la batería se muestra con el icono "100" en el lateral. El icono "100" parpadea durante la carga. El icono de carga completa deja de parpadear y el nivel de batería se muestra con "100".

⑧ Puerto de carga tipo C

Utilice un cargador de 5 V–1 A para cargar el producto y utilice la interfaz tipo C para el cable de carga.

⑨ Depósito de agua limpia

Llénelo con agua tibia a temperatura corporal al usarlo. Evite usar agua demasiado fría o demasiado clara, ya que podría ser perjudicial para el cuerpo. El depósito de agua tiene una capacidad de 500 ml y utilice el cable de carga tipo C.

⑩ Tanque colector de aguas residuales

Al usarlo, puede colocar el tanque colector de aguas residuales junto a su oído para recolectar las aguas residuales.

Antes de usar

1. Es normal que el producto (botella, tubo, etc.) tenga restos de agua destilada, utilizada para probar su rendimiento.
2. Se recomienda usar el modo 1.ª marcha la primera vez que lo use. Elija los demás modos según sus necesidades.
3. Se recomienda ablandar el cerumen duro o pesado antes de la irrigación.

Limpieza y mantenimiento

1. Saque el tanque de agua, enjuague el interior y el exterior del tanque con agua y luego déjelo secar al aire.

2. Reemplazo: después de 90 días de uso, la boquilla debe reemplazarse por una nueva.
3. Almacenamiento: limpie el dispositivo con un paño húmedo limpio. Asegúrese de que el dispositivo esté seco antes de guardarlo en un lugar fresco y seco.

Aviso:

(1) Evite sumergir el dispositivo en agua para evitar daños.
(2) Evite utilizar productos químicos agresivos: utilice líquido lavavajillas o agua tibia para limpiarlo en lugar de productos químicos agresivos o solventes.

Protección ambiental

1. Eliminación adecuada: al desechar el descargador o sus componentes, siga las normas y pautas locales sobre desechos electrónicos y evite desecharlos con los residuos domésticos normales.
2. Reciclaje de baterías: recicle las baterías recargables de manera adecuada. Consulte las instalaciones locales o los puntos de recolección para el reciclaje de baterías.
3. Eficiencia energética: ahorre energía apagando el descargador cuando no esté en uso y desenchufando el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

Instrucciones de carga

*** Utilice el cable de carga tipo C que viene con el producto para cargar su dispositivo.**

1. Apague el dispositivo antes de cargarlo y asegúrese de que no esté en uso.
2. Mantenga el dispositivo y el cargador alejados del agua para evitar riesgos eléctricos.
3. La pantalla LCD tiene un indicador de energía incorporado para ver fácilmente el nivel de energía.
4. Una vez que esté completamente cargado, desconecte el dispositivo del cargador.

Atención al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el rendimiento de su producto, o si se encuentra en una situación en la que faltan accesorios o están dañados, comuníquese con nuestro Servicio de atención al cliente.

Parámetros del producto

Nombre del producto: Eliminador de cerumen eléctrico	Entrada: Tipo C DC 5 V/1 A
Tiempo de carga: 3 horas	Capacidad del tanque de agua: 500 ml

意大利

Prima dell'uso, leggere attentamente e integralmente il presente manuale di istruzioni e conservarlo per riferimento futuro!

Precauzioni

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni, le avvertenze e i suggerimenti prima dell'uso. Un uso improprio può causare gravi lesioni personali e danni alla proprietà.

1. Non versare liquidi corrosivi nel prodotto per evitare danni al corpo umano e al prodotto stesso.
2. È normale avvertire pressione ma non dolore. Se avverti dolore, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e consulta il tuo medico per un aiuto professionale.
3. I bambini o le persone con disabilità devono usare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto o di un tutore.
4. Questo prodotto non è un giocattolo. Tienilo fuori dalla portata dei bambini.
5. Questo prodotto è dotato di una batteria. Tienilo lontano da fuoco, umidità e alte temperature. Potrebbe esplodere a causa del surriscaldamento.
6. Se non utilizzi questo prodotto, conservalo in un luogo asciutto.
7. Assicurati di collegare un alimentatore DC5V adatto per caricare il prodotto.
8. Non usare soluzioni al di sotto della temperatura corporea per evitare fastidi. Si consiglia di usare acqua calda (non troppo calda per evitare ustioni)
9. Non cambiare o modificare il prodotto o smontare l'attrezzatura interna, altrimenti potrebbe danneggiare il prodotto o causare lesioni personali.
10. Non classificarlo come rifiuto domestico. Quando non hai più bisogno di questo prodotto, utilizza il processo di riciclaggio del tuo governo locale e portalo a una stazione di riciclaggio di apparecchiature elettriche locale.

Suggerimenti: tutte le immagini nel manuale sono solo di riferimento. A causa di aggiornamenti o upgrade del prodotto, potrebbero esserci differenze tra il prodotto effettivo e l'immagine, fare riferimento al prodotto effettivo.

Risoluzione dei problemi

1. Se il prodotto non può essere acceso, caricarlo per evitare che la batteria si scarichi.
2. Se il prodotto ha un breve tempo di funzionamento dopo essere stato complet