
尺寸：80X120MM

屏幕数字耳镜
使用说明书

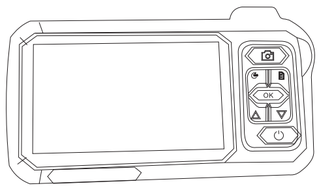

型号：T29


警告

●使用前必须仔细阅读使用说明书。
●使用前必须盖好耳镜探头的保护盖，然后对所有与皮肤接触的部位进行消毒。
●放在儿童接触不到的地方。儿童不得单独使用 必须在成人的帮助下使用。
●使用耳朵清洁耳垢时请格外小心。不要将它们插入耳道太远。
●使用设备时，防止他人触摸您的手，以防受伤。
●如果您有任何不适，请立即停止使用本产品
●本产品不能取代医生或医疗供应商的诊断或治疗。
●如果您有任何不适，请立即联系您的医生。

电池说明

●首次使用请充满电
●请使用符合安全规定的5V家用充电器给本设备充电
●本设备支持边充边用。
●如果长期放置不使用本设备，请确保每3个月至少充电一次，以防电池过度放电造成不可修复损伤。

功能介绍

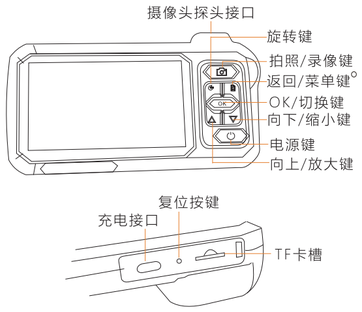

使用说明



将相机探头连接到通过正确的端口显示显示器



长按电源按钮打开或关闭直到看到 LOGO 图像



点击存储卡插入或弹出。TF卡状态：TF卡插入/无卡



支架可收纳/展开，使用方便，解放双手

注意

•插入TF卡前关闭设备。
•请正确放置TF卡。
•插入或翻转时不要用力过猛，以免损坏卡槽结构

语言设置

默认语言为英文，系统支持英文、中文、德文、法文、西班牙文、意大利文、俄文、日文

设置路径：
•按菜单按钮进入设置页面
•在设置页面选择第二项（语言）。
•按上下键选择您需要的语言。
•按确定保存您的选择。

规格参数

屏幕
屏幕类型：IPS彩色液晶显示屏
屏幕分辨率（像素）：854*480
拍照分辨率：1920*1080
录像分辨率：1920*1080
端口：Type-C充电端口，TF储存卡卡槽

摄像头
摄像头直径：3.9mm
摄像头分辨率：200万像素
可视角度：70°
最佳焦距：15-20mm


其他
工作温度：0°--45°
电池：3000mah
电池使用时间：3-4小时
电池充电时长：3小时

常见问题

故障排除指南
问：为什么图像如此模糊？以前超级清晰的。
答： 造成图像模糊的首要原因是耳垢粘在了相机的顶端。请使用抹布、酒精、化妆棉或 Q 型吸头进行清洁。
答：耳道不是完全直的，轻轻调整耳镜的位置可以清楚地看到耳膜




问：当图像出现冻结或说“没有相机”时，我该怎么办？
答：如果图像被冻结，请重新启动并重新启动显示器。最后，尝试找到“重置”并启动它。重要的是，要确保将照相机接口完全插入到监视器上。
问：什么是焦点范围？
答：请保持大约1厘米的焦距，以获得最佳质量的图像（将范围离焦距太远可能会导致图像模糊）

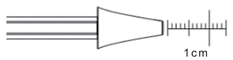

问：我几个月前买了它，它工作得很好，但现在不能打开它了，看起来它已经不能再工作了。
答：使用前请确保电池充满电。如果你不能打开这个范围，或者它在工作几分钟后关闭，这可能是电池电量不足的迹象。

OTOSCOPE User Manual

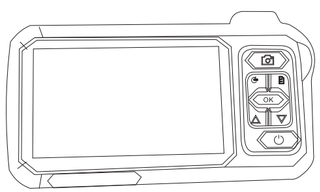

Model：T29


Warning

●You must read the instruction manual carefully before using.
●You must put the protective cover on to the otoscope probe before using, then sanitize all the areas that contact the skin.
●Keep out of reach of children. Children are not allowed to use this product alone, they must be used with the help of adults.
●Please take great care when using ear to clean earwax. DO NOT insert them too far in to the ear canal.
●Prevent someone from touching your hand when use the device in case of injury
●Stop using this product immediately if you experience any discomfort
●This product can not replace a doctor or medical providers diagnosis or treatment. Contact your doctor immediately if you experience any discomfort.

Battery Description

●Please fully charged for the first time use.
●Please use a 5V household charger that complies with safety regulations to charge this device.
●This device can work while charging
●If you do not use the device for a long time,please ensure that it is charged at least once every 3 months to prevent irreparable damage caused by excessive battery discharge.

Features

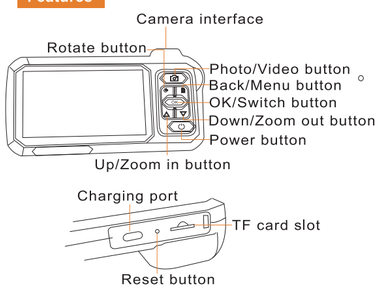

Instructions for use



Connect the camera probe to the monitor by correct port



Extended press to the power button to turn on or off the device until see the LOGO image.



Tap the memory card to insert or eject.TF card status :T F card inserted/no card



The stand can be stored/-expanded, easy to use, free hands

Attention

●Power off device before inse rt TF card.
●Please place the TF card correctly.
●Do not use excessive force when inserting or flipping to avoid damaging the slot structure.

Language Setting

The default language is English, the system supports English, Chinese, German, French, Spanish, Italian, Russian and Japanese.
Setting path:
● Press the “” button to enter the setting page
●Select second item (Language)on setting page.
●Press up and down keys to select the language you need
●Press OK to save your choice.

Specifications

About the screen
Screen type: IPS display
Screen resolution(Pixel)： 854*480
photo resolution(Pixel) 1920*1080
Video Recording resolution(Pixe l) 1920*1080
Port: Type-C charging port, TF memory card slot

Camera
Diameter： 3.9mm
Camera resolution: 2 million pixels
Viewing angle:70°
Depth of Field: I5-20mm


Others
Operating Temperature:32°Fto I I3°F(0°C to 45°C)
Power Source:3000mAh Lithium Battery
Max battery life:4 ~5hours
Charging time:2~3 hours

FAQ

TROUBLSHOOTING GUIDE
Q: Why is the image so blurry? It used to be super clear.
AI: The No.I reason that cause those blurry images are the ear wax being stuck to the tip of the camera.Please use a cloth,alcohol,pad,or a Q-tip to clean it.You can apply a little pressure to make sure you get all the ear wax/dirt off the tip of the camera.
A2: The ear canal is not perfectly straight, gently adjust the position of the otoscope to view your eardrum clearly



Q: What should I do when images appear frozen or says "No camera"?
A: If the image is frozen,please REBOOT and RESTART the monitor. Finally, try to find "reset"and start it.Important, ensure the camera interface is fully inserted to the monitor.
Q: What is focal range?
A2: Please keep a focal length of about 1cm to achieve the best quality image(placing the scope too far from your focal point may result in blurry images)

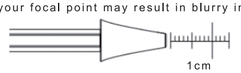

Q: I bought it a few months ago and it worked well,but now I can't turn it on, looks like it does not work anymore.
A: Please make sure the battery is fully charged before you use it.If you cannot turn on the scope,or it turns off after a few minutes of working, it can be the sign of low battery.

⚠ Warning! Read all safety warnings and instructions before using this product. Failure to follow the warnings and instructionns may result in product damage.

MADE IN CHINA